


Pończochy uciskowe NORIKS z zamkiem

Stopniowany ucisk 15–20 mmHg z bocznym zamkiem błyskawicznym.

Ucisk	15 – 20 mmHg, stopniowany (najsilniejszy przy kostce)
Zamek	Boczny zamek błyskawiczny z ochronną wewnętrzną patką
Rozmiary	S/M, L/XL, 2XL — według obwodu łydki
Noszenie	W ciągu dnia, do 12 godzin
Pranie	Ręcznie w zimnej wodzie lub program delikatny

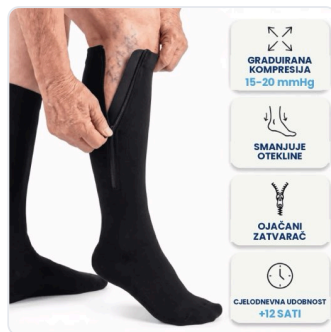

W ZESTAWIE

- 1 para pończoch uciskowych (zgodnie z wybranym zestawem)

SZYBKİ START

- Zmierz obwód łydki w najszerszym miejscu i wybierz rozmiar z tabeli.
- Zakładaj pończochy rano, na siedząco, zanim nogi spuchną.
- Zamek zapinaj od kostki w górę, przytrzymując tkaninę przy nodze.

1. Dobór rozmiaru

Rozmiar	Obwód łydki	Rozmiar buta
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

Rozmiar dobierz według **obwodu łydki**, a nie rozmiaru buta. Mierz rano, w najszerszym miejscu łydki, przy rozluźnionej nodze. Jeśli jesteś na granicy dwóch zakresów, weź większy rozmiar.

2. Zakładanie

- Usiądź i rozepnij zamek do końca.
- Naciągnij pończochę na stopę tak, aby pięta trafiła w wyprofilowaną dla niej część.
- Wyrównaj pończochę na łydce, bez jednej fałdy — fałdy tworzą punkty ucisku.
- Jedną ręką dociśnij tkaninę do nogi, aby ochronna patka pozostała między zamkiem a skórą, drugą powoli zapnij zamek od kostki w górę.
- Sprawdź, czy górna krawędź się nie zawija i nie wrzyna w kolano.

WIĘCE OD 5.200 ZADOVOLJNIH KUPACA



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obuti cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

Zamek ułatwia zakładanie bez szarpania.



Stopniowany ucisk: najsilniejszy przy kostce, słabszy w kierunku kolana.

3. Jak długo nosić

- Zakładaj rano i noś w ciągu dnia — do około 12 godzin.
- Zdejmij przed snem, chyba że lekarz zalecił inaczej.
- Przy długim staniu, siedzeniu lub podróży noś je przez cały czas trwania aktywności.
- Przez pierwsze dni ucisk może wydawać się nietypowy — zacznij od 2 do 3 godzin dziennie.

4. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Zamek sam się rozpina	Tkanina jest ściągnięta w dół albo obwód jest przy górnej granicy	Przed zapięciem podciągnij pończochę wyżej na łydcę; jeśli się powtarza, weź większy rozmiar
Nie mogę zapiąć zamka	Za mały rozmiar lub obrzęk nogi	Zakładaj rano; jeśli i wtedy się nie da, wymień na większy rozmiar
Mrowienie, zimne lub blade palce	Za mocny ucisk lub uciskająca fałda	Natychmiast zdejmij pończochę, wygładź ją i załóż ponownie; jeśli się powtarza, zgłoś się do lekarza
Pończocha zsuwa się w dół	Obwód łydki przy dolnej granicy zakresu	Weź mniejszy rozmiar
Czerwone ślady na skórze	Fałda albo zbyt mocno napięta górna krawędź	Wygładź tkaninę; delikatny odcisk dzianiny jest normalny, głęboko wciśnięty ślad nie

5. Pranie i pielęgnacja

- Pierz ręcznie w zimnej wodzie albo w pralce na programie dla tkanin delikatnych, z **zapiętym zamkiem** i w siatce.
- Bez wybielaczy i płynów zmiękczających — niszczą elastyczne włókna odpowiadające za ucisk.
- Susz na powietrzu, na płasko. Nie w suszarce, na kaloryferze ani na słońcu.
- Zamek od czasu do czasu przetrzyj wilgotną szmatką, aby nie zostawały w nim włókna.

- Przy codziennym noszeniu wymieniasz parę mniej więcej co 6 miesięcy — ucisk z czasem słabnie.

Przed noszeniem skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz chorobę tętnic obwodowych, otwarte rany, ostre zapalenie skóry, zmiany cukrzycowe na stopie lub zakrzepicę żył głębokich.

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.
- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.
- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

Pończochy uciskowe są codziennym wsparciem, a nie leczeniem. Nie stawiają diagnozy i nie zastępują porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.