

NORIKS Bunion Fix — korektor haluksów

Stopniowe prostowanie palucha przy 30 minutach do 3 godzin dziennie.

Rozmiar	Uniwersalny — pasuje na każdy rozmiar stopy
Strona	Ten sam korektor na lewą i prawą stopę
Wyściółka	Miękka wewnętrzna wyściółka chroniąca skórę
Regulacja	Elastyczne taśmy z regulowanym napięciem
Zalecane	Od 30 minut do 3 godzin dziennie



W ZESTAWIE

- 1 korektor haluksów
- Elastyczne taśmy do regulacji


SZYBKI START

1. Załóż korektor tak, aby poduszka przylegała do wystającej kości, a pętla obejmowała paluch.
2. Napnij taśmę tylko na tyle, aby poczuć delikatne rozciąganie — nigdy do bólu.
3. W pierwszym tygodniu noś 30 minut dziennie, potem stopniowo wydłużaj.

1. Zakładanie

- 1 Usiądź i oprzyj stopę tak, aby palce były rozluźnione.
- 2 Przełóż paluch przez pętlę, aż poduszka przylgnie do wystającej kości z boku stopy.
- 3 Przeprowadź taśmę wokół środka stopy i napnij ją tylko na tyle, aby poczuć delikatne rozciąganie.
- 4 Sprawdź, czy poduszka leży płasko, bez fałd, a taśma nie uciska grzbietu stopy.
- 5 Paluch powinien być odciągnięty na zewnątrz, ale bez napięcia wywołującego ból.

Udobno, prilagodljivo i lako za nošenje kod kuće

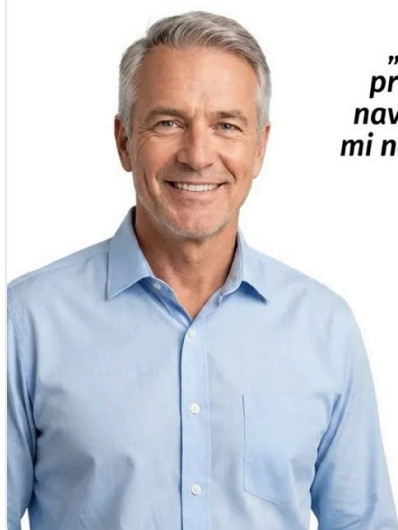

„Mekan je i lako se prilagodi. Stavim ga navečer uz TV i uopće mi ne smeta — zato ga nosim redovno.“

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Korektor obejmuje paluch i odcijaża wystającą kość.

Zašto je Noriks drugačiji:



Napredna terapija poravnanja



Patentirani zglobni mehanizam



Podesivo rastezanje



Meko jastučić za čukalj



Vrhunski izdržljivi materijali



Bezbolno poravnanje

Celom jest stopniowe przywracanie palucha do prawidłowszego ustawienia.

2. Plan noszenia

Okres	Dziennie	Kiedy
1. tydzień	30 minut	Wieczorem, na siedząco
2. tydzień	45 – 60 minut	Wieczorem lub w czasie odpoczynku
3. tydzień	1 – 2 godziny	Podzielone na dwa okresy
Od 4. tygodnia	2 – 3 godziny	W jednym lub dwóch okresach, według komfortu

Regularność jest ważniejsza niż długość. Trzydzieści minut codziennie daje lepszy efekt niż trzy godziny raz w tygodniu.

3. Czego możesz oczekiwać

- Pierwsze dni: uczucie rozciągnięcia i ulgi po zdjęciu korektora.
- Po około dwóch tygodniach konsekwentnego stosowania: mniejszy dyskomfort przy chodzeniu i staniu.
- Po około miesiącu: wyraźniejsza zmiana ustawienia palucha.
- Korektor działa, gdy jest noszony, i przy regularnym stosowaniu — nie jest rozwiązaniem jednorazowym.

4. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Ból podczas noszenia	Taśma napięta za mocno	Poluzuj taśmę; uczucie ma być rozciąganiem, nigdy bólem
Korektor zsuwa się z palucha	Taśma napięta za słabo lub wilgotna skóra	Osusz stopę i napnij taśmę o jeden stopień

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Zaczerwienienie skóry	Fałda na wyściółce lub zbyt długie noszenie na początku	Wygladź wyściółkę i skróć czas noszenia do 30 minut

5. Czyszczenie

- Przetrzyj wilgotną szmatką z łagodnym mydłem, opłucz i wysusz na powietrzu.
- Nie pierz w pralce i nie susz na kaloryferze — guma traci napięcie.

Nie zakładaj korektora na otwartą ranę ani na zapaloną skórę. Przy cukrzycy, obniżonym czuciu w stopie lub silnym, utrzymującym się bólu skonsultuj się najpierw z lekarzem.

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.
- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.
- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

Bunion Fix jest codziennym wsparciem, a nie leczeniem. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.